

# STYLEMA® FILLER LINE

MOLTO PIÙ DELLA SOMMA  
DELLE DUE PARTI

LABORATORI  
**COLLAGENIL**

PROFESSIONAL LINE

Una collezione a base di **Acido ialuronico** e **Aminoacidi bioattivi** che permette di ottenere volume immediato e una pelle rigenerata e radiosa.



Una tecnologia di reticolazione *slow cross-linking*, più la sinergia tra **Acido ialuronico** e **Aminoacidi bioattivi** garantiscono caratteristiche reologiche uniche, assicurando un effetto più naturale e duraturo.

# GLICINA E PROLINA

I COMPONENTI DEL COLLAGENE

## NELLA PELLE: AZIONE ANTI-INVECCHIAMENTO E DI PREVENZIONE

### STIMOLANO

La sintesi di collagene, consentendo maggiore elasticità ai tessuti.

### MIGLIORANO

La texture cutanea, attenuando le rughe e le linee di espressione.

### AUMENTANO

Il contenuto di collagene, per una pelle più idratata, compatta e luminosa.

### PROTEGGONO

La pelle dai danni causati dai radicali liberi, contribuendo a prevenire i segni dell'invecchiamento.



## ALL'INTERNO DEL FILLER: DURATA E QUALITÀ DEI RISULTATI

### OTTIMIZZANO LA VISCOSITÀ

Per un'applicazione più precisa e controllata.

### AUMENTANO LA RESA DEL PRODOTTO

Migliorando l'integrazione tissutale.

### CONTRIBUISCONO A RISULTATI PIÙ DURATURI


Incrementando la biosintesi collagenica.

## ELEVATA CAPACITÀ REOLOGICA

Inseriti in un iniettabile insieme ad acido ialuronico, i due aminoacidi, Glicina e Prolina aumentano le performance del prodotto migliorando le caratteristiche visco-elastiche.

Studi comparativi di prodotti contenenti solo acido ialuronico rispetto a prodotti con l'aggiunta di aminoacidi, quali Glicina e Prolina, hanno evidenziato il miglioramento dei valori di elasticità ( $G'$ ) e viscosità ( $G''$ ).

### GLICINA E PROLINA: $G'$

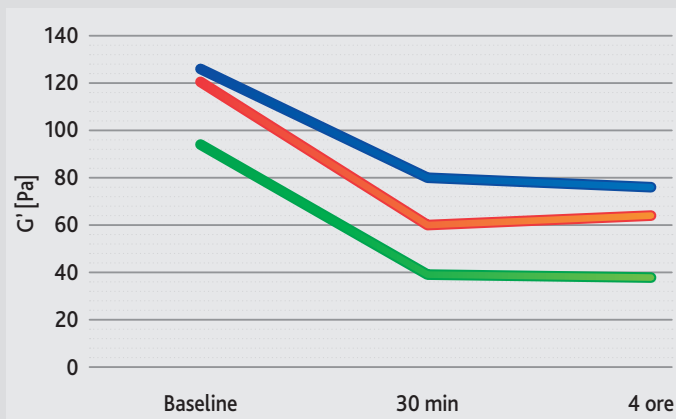


Il  $G'$  della soluzione di HA con Glicina e Prolina rispetto all'iniettivo contenente HA alla medesima concentrazione.

+ 39 Pa

■ HAP24-GLYPRO ■ HAP24-GLY ■ HAP24

### GLICINA E PROLINA: $G''$

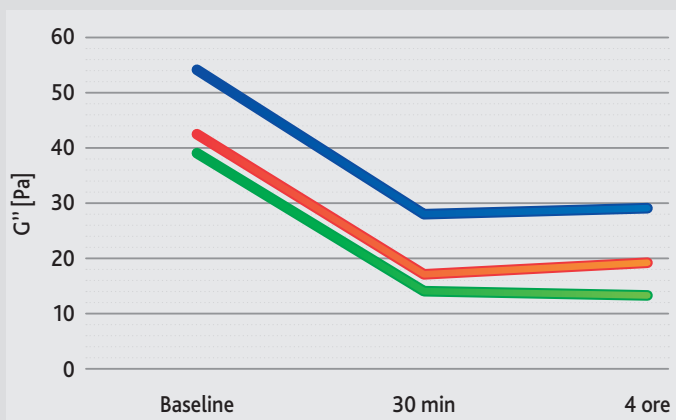


Il  $G''$  della soluzione di HA con Glicina e Prolina rispetto all'iniettivo contenente HA alla medesima concentrazione.

+ 12 Pa

■ HAP24-GLYPRO ■ HAP24-GLY ■ HAP24

## EFFICACIA


Studi condotti su Stylema nelle concentrazioni di 24mg/ml e 28mg/ml hanno dimostrato che il **98% dei pazienti ha riscontrato un aspetto "molto, molto migliorato" e "molto migliorato"** subito dopo il trattamento, secondo la scala di miglioramento estetico globale (GAIS – Global Aesthetic Improvement Scale).

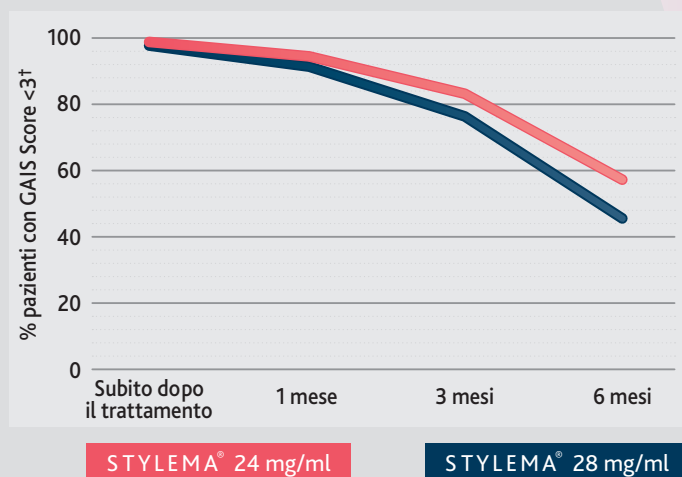

98% DEI CASI  
CON ASPETTO  
ESTREMAMENTE  
MIGLIORATO E MOLTO  
MIGLIORATO

## DURATA

Inoltre, gli stessi studi hanno dimostrato che **l'effetto di riempimento è durato oltre 6 mesi** e risultati eccellenti sono rimasti nelle labbra e nella zona periorale nel 45% dei pazienti e nella correzione dell'ovale del viso nel 57%.

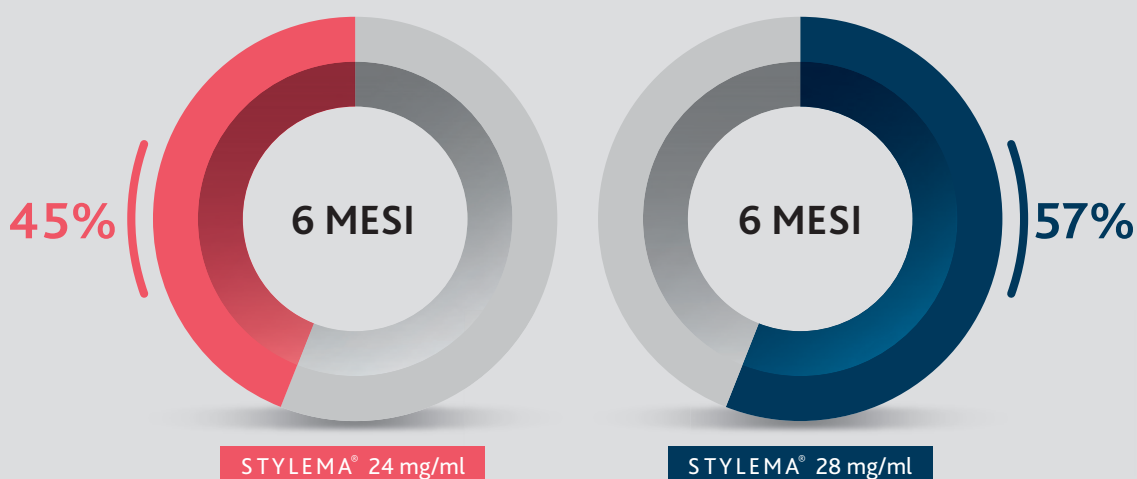

\* Studio condotto su 40 pazienti (75% donne) con età media 42.3 anni (SD ±13.3).

\*\* Studio condotto su 30 pazienti (83% donne) con età media 50.2 anni (SD ± 8.8).

† GAIS Score: 1 = very much improved; 2 = much improved; 3 = improved; 4 = no change; 5 = worse (Kopera, D. et al. (2015). An open-label uncontrolled, multicenter study for the evaluation of the efficacy and safety of the dermal filler Princess VOLUME in the treatment of nasolabial folds. BioMed research international, 2015, 195328. <https://doi.org/10.1155/2015/195328>).

# STYLEMA® ■ FLEXI



Inquadra il QR code con la fotocamera per visualizzare il video degli impianti di Stylema® Flexi



## INDICAZIONI

STYLEMA® FLEXI è indicato per il riempimento di rughe mediamente profonde attraverso l'iniezione del prodotto nel derma in modo da colmare le rughe e le linee del viso così che la pelle riacquisti il suo volume in maniera naturale.

È indicato, infatti, per il riempimento di pieghe nasolabiali ma anche per quelle di guance e mento.

## TIPOLOGIA DI PAZIENTE IDEALE

- Pazienti con scarsa qualità dei tessuti o con pelle sottile e rilassata.


## CARATTERISTICHE PRODOTTO

■ Concentrazione di ialuronato di sodio reticolato	24 mg/ml
■ Soluzione tampone fosfato arricchita* (*con Glicina e L-Prolina)	as a 1 ml
■ Grado di reticolazione	
■ G' /G''	90 Pa / 40 Pa
■ Packaging	1 x 1 ml - 2 x 27 G



## TECNICA DI INIEZIONE (RACCOMANDAZIONI)


**Nasogeniena**  
(lineare retrograda)

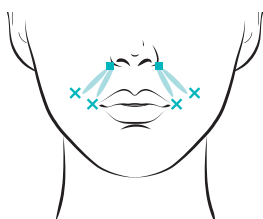


**Gote**  
(bolo)  
(raggiera)



**Labio-mentoniera**  
(lineare retrograda)

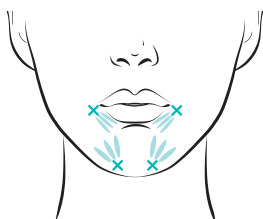

**Mento**  
(bolo + raggiera)  
(laterale)

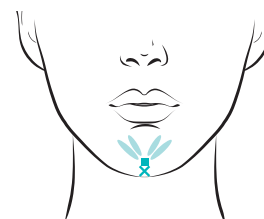

Punto d'ingresso ✕ Bolo ■ Estrusione

# STYLEMA® ■ VOLUME



Inquadra il QR code con la fotocamera per visualizzare il video degli impianti di Stylema® Volume



## INDICAZIONI

STYLEMA® VOLUME è stato appositamente studiato per ripristinare il volume di gote, zigomi e mento.

È indicato per il riempimento di volti svuotati attraverso l'iniezione del prodotto nel derma profondo così che la pelle riacquisti il suo volume ridonando armonia al volto.

## TIPOLOGIA DI PAZIENTE IDEALE

- Pazienti che desiderano una correzione strutturale di alcune parti del volto.


## CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Concentrazione di ialuronato di sodio reticolato 26 mg/ml
- Soluzione tampone fosfato arricchita\* as a 1 ml  
(\*con Glicina e L-Prolina)
- Grado di reticolazione
- G' /G'' 100 Pa / 45 Pa
- Packaging 1 x 1 ml - 2 x 27 G




## TECNICA DI INIEZIONE (RACCOMANDAZIONI)


**Area zigomatica**  
(bolo)  
(raggiera)

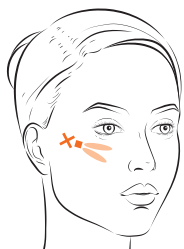


**Gote**  
(bolo)  
(raggiera)

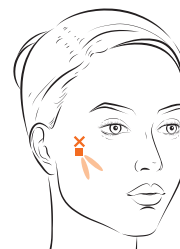

**Mento**  
(bolo + raggiera)  
(laterale)

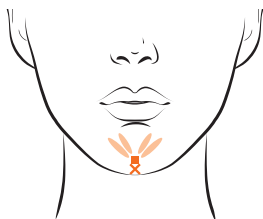

**Nasogeniena**  
(lineare retrograda)

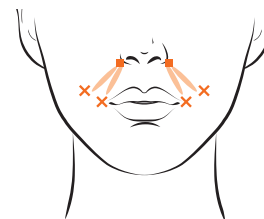

Punto d'ingresso ✕ Bolo ■ Estrusione ○

# STYLEMA® ■ ULTRA



Inquadra il QR code con la fotocamera per visualizzare il video degli impianti di Stylema® Ultra



## INDICAZIONI

STYLEMA® ULTRA è stato appositamente studiato per il ripristino di grandi volumi del viso.

È dunque il trattamento d'eccellenza per chiunque voglia correggere alcuni inestetismi, tra i quali la forma del naso, e la jawline.

## TIPOLOGIA DI PAZIENTE IDEALE

- Pazienti con volti svuotati
- Pazienti che desiderano una correzione strutturale di tutto il volto (Beautification)

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

■ Concentrazione di ialuronato di sodio reticolato	28 mg/ml
■ Soluzione tampone fosfato arricchita* (*con Glicina e L-Prolina)	as a 1 ml
■ Grado di reticolazione	■■■■■
■ G' /G''	160 Pa /75 Pa
■ Packaging	1 x 1 ml - 2 x 25 G




## TECNICA DI INIEZIONE (RACCOMANDAZIONI)


Naso  
(bolo)




Jawline  
(bolo + lineare retrograda)

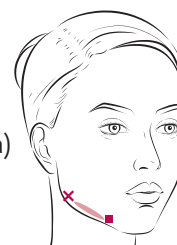

Mento  
(bolo)

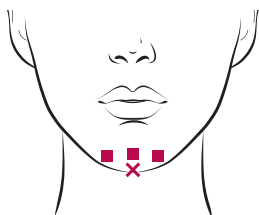

Nasogeniena  
(lineare retrograda)

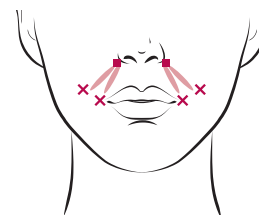

Punto d'ingresso ✕    Bolo ■    Estrusione ●

# STYLEMA® ■ LIPS VOLUME



Inquadra il QR code con la fotocamera per visualizzare il video degli impianti di Stylema® Lips Volume



## INDICAZIONI

STYLEMA® LIPS VOLUME è formulato per rimodellare e aumentare il volume delle labbra, per alzarne il contorno e per ridare simmetria all'intera area peribuccale.

## TIPOLOGIA DI PAZIENTE IDEALE

- Millennial
- Paziente che desidera labbra carnose/sensuali
- Paziente che desidera una correzione strutturale di una zona specifica della terza parte inferiore (mento-pieghe naso-labiali)


## CARATTERISTICHE PRODOTTO

■ Concentrazione di ialuronato di sodio reticolato	24 mg/ml
■ Soluzione tampone fosfato arricchita* (*con Glicina e L-Prolina)	as a 1 ml
■ Grado di reticolazione	■ ■ ■ ■ □ □
■ G' /G''	90 Pa / 40 Pa
■ Packaging	1 x 1 ml - 2 x 27 G



## TECNICA DI INIEZIONE (RACCOMANDAZIONI)


**Volume**  
(lineare retrograda)

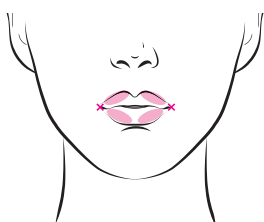


**Contorno**  
(verticale)



**Volume**  
(bolo)

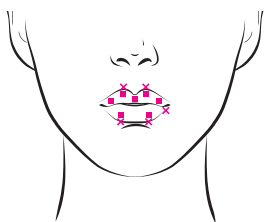

**Mento**  
(bolo + raggiera)  
(laterale)

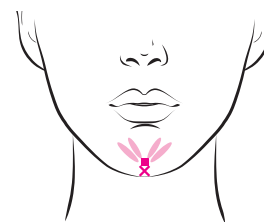

Punto d'ingresso ✕ Bolo ■ Estrusione ○

# STYLEMA<sup>®</sup>

## SCHEDE TECNICHE



### DATI TECNICI

STYLEMA<sup>®</sup> ■ FLEXI

CONCENTRAZIONE HA

2,4% (24 mg/ml)

SOLUZIONE TAMPONE FOSFATO  
ARRICCHITA CON GLICINA E L-PROLINA

qs a 1 ml

GRADO DI RETICOLAZIONE




$G' / G''$


90 Pa / 40 Pa

PACKAGING

1 x 1 ml – 2 x 27 G

PIANO D'INIEZIONE  
CONSIGLIATO

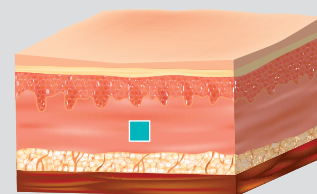

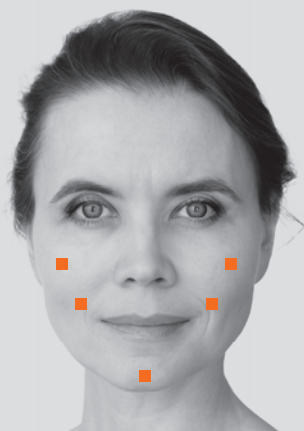

STYLEMA® ▪ VOLUME



2,6% (26 mg/ml)

qs a 1 ml



100 Pa / 45 Pa

1 x 1 ml – 2 x 27 G

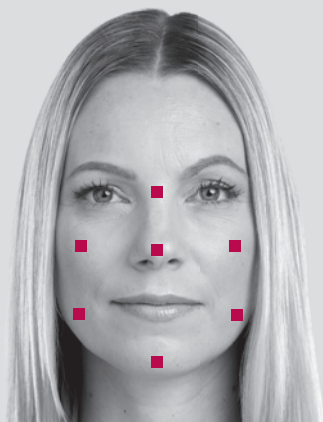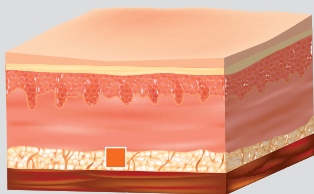

STYLEMA® ▪ ULTRA


2,8% (28 mg/ml)

qs a 1 ml



160 Pa / 75 Pa

1 x 1 ml – 2 x 25 G

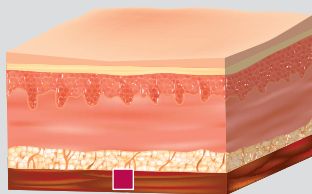

STYLEMA® ▪ LIPS VOLUME


2,4% (24 mg/ml)

qs a 1 ml



90 Pa / 40 Pa

1 x 1 ml – 2 x 27 G

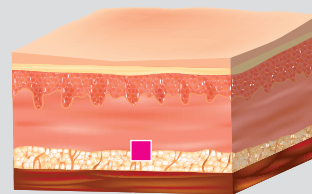

LABORATORI  
**COLLAGENIL**

PROFESSIONAL LINE



COLLAGENIOFFICIAL



COLLAGENIL

[www.collagenil.it/professional](http://www.collagenil.it/professional)